

G1

Εγχειρίδιο Οδηγιών Πολυθρόνα Μασάζ ROHΛUS





Ζωντανή Τέχνη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον εξοπλισμό μασάζ που κατασκευάζει η εταιρεία μας.

Υιοθετώντας τον εργονομικό σχεδιασμό, αυτή η πολυθρόνα μασάζ κάνει μασάζ για πολλά μέρη, π.χ. πλάτη, μέση, γοφούς, πόδια, χέρια κ.λπ.. Με διάφορες μεθόδους μασάζ, όπως θέρμανση, δόνηση και συμπίεση αερόσακων, είναι μια πολυτελής, απολαυστική και υψηλής ποιότητας πολυθρόνα μασάζ.

Πριν από τη λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και δώστε προσοχή στην ασφάλεια.


Έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και χρήση αυτού του προϊόντος.

Κρατήστε σωστά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για καλύτερη αναζήτηση στο μέλλον



Κατάλογος

- I. Προσοχή Ασφαλείας
- II. Δομή και παράμετρος προϊόντος
- III. Οδηγίες εγκατάστασης της καρέκλας μασάζ
- IV. Οδηγίες λειτουργίας του προγράμματος μασάζ
- V. Συντήρηση και επισκευή

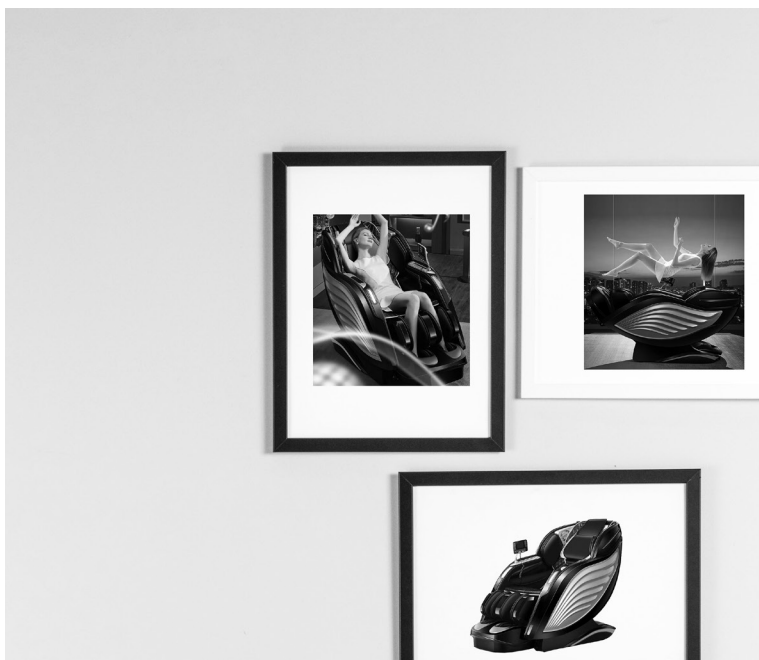

Προσοχή:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αναλυτικά όλες τις οδηγίες.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καύσης, ηλεκτροπληξίας ή οποιουδήποτε κινδύνου πρόκλησης άλλου ατυχήματος ανθρώπινου τραυματισμού, ακολουθήστε αυστηρά τις ακόλουθες οδηγίες

1) Δεν επιτρέπεται η χρήση του τροφοδοτικού εκτός από 220V.

2) Όταν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται, φροντίστε να βγάλετε το φισ από την πρίζα. Όταν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται καθημερινά ή ο εξοπλισμός/εξάρτημα πρόκειται να αποσυαρμολογηθεί, βγάλτε το φισ από την πρίζα

3) Για να αποφύγετε την πρόκληση πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ανθρώπινου τραυματισμού, μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα κολώνες, κουβέρτες ή άλλα καλύμματα





Έξυπνος μηχανισμός

Βραχίονας μηχανικού μασάζ

Κοντινή ράγα οδηγού

Σημαντική Προσοχή για την Ασφάλεια:

- 4) Μόλις το προϊόν διαφημιστεί ή κλείσει για παιδιά, δείτε με ψυχασωματική δυσλειτουργία ή με ειδικές ανάγκες άτομα, απαιτεί επίβλεψη ή καθοδήγηση από ενήλικες επόπτες 53 Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με την εφαρμογή που αναφέρεται στο εγχειρίδιο οδηγιών
- 5) Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε κανένα συστατικό που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή
- 6) Υπό τις ακόλουθες συνθήκες, μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος ή το βύσμα τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά, η λειτουργία είναι μόλις το προϊόν έχει παχύνει πολύ στο έδαφος ή έχει άλλες ζημιές που το προϊόν έχει πέσει ποτέ στο νερό. Παρακαλώ στείλτε τα προϊόντα της στο κέντρο συντήρησης για έλεγχο και επιστροφή
- 7) Παρακαλούμε μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας, θεωρώντας το καλώδιο τροφοδοσίας ως το καλό
- 8) Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε απόσταση από την επιφάνεια επαύλωσης
- 9) Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν όταν ο ανεμιστήρας είναι μπλοκαρισμένος Παρακαλούμε να διατηρείτε τον εξαερισμό ανεμπόδιστο, για να αποφευχθεί το μπλοκάρισμα από την άνω και κάτω τελεία. Fair και se-or
- 10) Μην εισάγετε ή πέφτετε οποιοδήποτε αντικείμενο αφήνει το άνοιγμα του προϊόντος
- 11) Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν έξω
- 12) Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη που ψεκάζουν υλικά ή οξυγόνο
- 13) Θέλετε να κόψετε την τροφοδοσία ρεύματος παρακαλώ κλείστε όλη τη λειτουργία και την κουβέντα πριν βγάλετε το φως από την κάλτσα
- 14) Βεβαιωθείτε ότι έχετε σκουπίσει και επιβεβαιώσει ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν το προϊόν ως ψυχαγωγικό εξοπλισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αγνότητά τους

Προσοχή Ασφαλείας:

1. Χρήση περιβάλλοντος

Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μασάζ σε περιβάλλον με υπερβολική υγρασία ή σκόνη, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή βλάβης μηχανής. Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε χώρο με θερμοκρασία άνω των 40°C. Μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό μασάζ κοντά σε θερμάστρα, σόμπα ή με άμεση ηλιοφάνεια. Ο εξοπλισμός μασάζ είναι σχεδιασμένος για ατομική χρήση. Παρακαλώ μην το χρησιμοποιείτε για οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο εξοπλισμός μασάζ περιορίζεται μόνο για χρήση στο δωμάτιο. Εάν ο εξοπλισμός μασάζ χρησιμοποιείται σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. Παρακαλώ μην ανεβάζετε τη θερμοκρασία ξαφνικά. Προτείνεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ώστε να είναι σε κανονικό εύρος πριν από το re. Εάν ο εξοπλισμός μασάζ μετακινηθεί από χώρο αποθήκευσης με σχετικά χαμηλή θερμοκρασία σε περιβάλλον, η κανονική λειτουργία του εξοπλισμού ενδέχεται να επηρεάζονται λόγω της υγρασίας που συγκεντρώνεται στο μηχανήμα. Σε σοβαρές συνθήκες, μπορεί ακόμη και να προκαλέσει βλάβη του μηχανήματος. Μετά τη μετακίνηση, ο A πρέπει να τοποθετήσετε το προϊόν για μία ώρα στην κανονική θερμοκρασία δωματίου πριν το χρησιμοποιήσετε.

2. Προσοχή Ασφαλείας:

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση της μηχανής μασάζ, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρησιμοποιήσετε. Εάν το υφασμάτινο κάλυμμα της μηχανής μασάζ έχει σπάσει, μην το χρησιμοποιήσετε. Για να αποφύγετε τη μείωση της επίδρασης του μασάζ ή την καταστροφή του εξοπλισμού, μην χρησιμοποιείτε μαζί με άλλο θεραπευτικό εξοπλισμό, όπως ηλεκτρική κουβέρτα. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εντός μίας ώρας μετά το φαγητό, για να αποφύγετε αρνητικές επιπτώσεις. Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μασάζ με βρεγμένα χέρια ή σώμα.

- Μην τοποθετείτε κανένα προϊόν ή εύφλεκτο προϊόν στην πολυθρόνα μασάζ, γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, βλάβη ή καταστροφή πυρκαγιάς
- Σταματήστε αμέσως τη λειτουργία εάν αισθανέστε άβολα κατά τη χρήση
- Κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού, μην καλύπτετε τον εξοπλισμό μασάζ, αποφεύγοντας έτσι την πρόκληση βλάβης ή πυρκαγιάς λόγω πολύ υψηλής θερμοκρασίας Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτοδιάγνωση ή θεραπεία. Παρακαλούμε πηγαίετε για θεραπεία από επαγγελματίες ιατρούς άτομα εάν χρειάζεστε διάγνωση ή θεραπεία. Όσον αφορά τους πελάτες που δέχονται ιατρική θεραπεία, συμβουλευτείτε τις υποδείξεις των γιατρών πριν χρησιμοποιήσετε
- Εάν αισθανέστε άβολα ή είστε έγκυος, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν συμβουλευτείτε τον γιατρό.
- Ο προτεινόμενος χρόνος χρήσης είναι 15-30 λεπτά. Πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά, βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός έχει σταματήσει για περισσότερο από 10 λεπτά. Εάν ο εξοπλισμός έχει χρησιμοποιηθεί συνεχώς για ένα χρονικό διάστημα, μπορεί να ενεργοποιηθεί η προστασία υπερθέρμανσης για να διακόψετε την παροχή ρεύματος.
- Ο εξοπλισμός θα παράγει θερμότητα στην επιφάνεια. Όσοι δεν είναι ευαίσθητοι στη ζέση πρέπει να είναι προσεκτικοί στη χρήση

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε το όργανο μετά το ποτό ή όταν αισθανέστε άβολα
- Μην κάνετε απευθείας μασάζ στο κεφάλι, την άρθρωση του αγκώνα, το γόνατο, το στήθος, το στομάχι
- Εάν χυθεί ή χυθεί οποιοδήποτε υγρό στον εξοπλισμό μασάζ, βγάλτε αμέσως το φιν από την πρίζα. Μην εισάγετε και μην τραβάτε το φιν ρεύματος με βρεγμένα χέρια
- Μην καταστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό μασάζ όταν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, γιατί μπορεί να προκληθεί τυχαία ηλεκτροπληξία ή μηχανική βλάβη
- Οι ακατάλληλες συνθήκες για τη χρήση του εξοπλισμού μασάζ:
- Σε περίπτωση των παρακάτω συνθηκών, παρακαλούμε απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό και διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος και στη συνέχεια επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.
- Το νερό χύνεται στον εξοπλισμό μασάζ. Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία
- Το υφασμάτινο κάλυμμα του εξοπλισμού μασάζ έχει σπάσει και το εσωτερικό μηχανήμα εκτίθεται
- Στο μασάζ, εάν υπάρχει κάποια μη φυσιολογική κατάσταση ή σοβαρός πόνος, κάντε αμέσως μασάζ και ρωτήστε για ιατρική βοήθεια.
- Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αναστολή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη λειτουργία, σταματήστε αμέσως τη χρήση.
- Εάν συμβεί οποιαδήποτε αναστολή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη λειτουργία, προσέξτε για να αποφύγετε να βλάψετε τον χρήστη από την ξαφνική ανάκτηση του ηλεκτρικού ρεύματος
- Σε κεραυνούς





Αερόσακος ποδιού

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Προδιαγραφές προϊόντος


Όνομασία προϊόντος	Πολυτελής καρέκλα μασάζ
Μετρημένη ηλεκτρική τάση	220V-50Hz
Όνομαστική ισχύς	120W
Τύπος ασφαλείας	Τύπος Ι
Εκτελεστικό πρότυπο	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008



Προετοιμασία πριν το μασάζ - εύκολη συναρμολόγηση

(1) Τοποθετήστε την πλάτη

Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε την καρέκλα μασάζ στο επίπεδο έδαφος, σηκώστε το μέρος της πλάτης, πιέστε προς τα κάτω, αφού ακούσετε τον ήχο κοπής», διορθώνεται

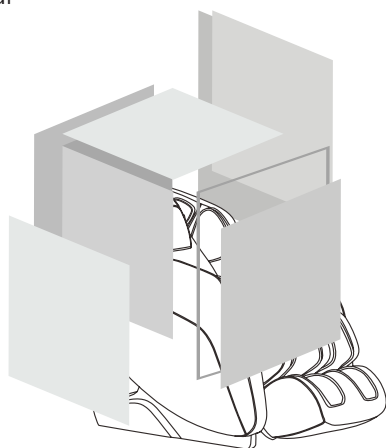

IV. (2) Εγκατάσταση πλαινού πάνελ

1. Βγάλτε το πλαινό πάνελ και ξεχωρίστε την αριστερή, τη δεξιά και την πίσω πλευρά. Ανασηκώστε το πλαινό πλαίσιο και ευθυγραμμίστε την εγκοπή στο πλαινό πλαίσιο με το στρογγυλό παξιμάδι στην επάνω πλευρά του κύριου μηχανήματος. Η σχάρα σιδήρου κάτω από το πλαινό πάνελ πρέπει να στερεωθεί στη σχάρα σιδήρου στο κύριο μηχάνημα. Αφού τοποθετήσετε το παξιμάδι, σύρετε το πλαινό πλαίσιο προς τα κάτω. Στο άκουσμα του ήχου “caka”, η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία (η ίδια μέθοδος για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά).

Παξιμάδι στο πλάι της μηχανής man

Ανοίξτε το πλαινό πλαίσιο

Τοποθετήστε το αυλάκι και το παξιμάδι

2. Συνδέστε τους σωλήνες αερόσακου του πλαινού πλαισίου και του κύριου μηχανήματος. Οι σωλήνες των ίδιων χρωμάτων θα συνδεθούν μεταξύ τους.

3. Η θέση κάτω από το πλαινό πάνελ και το κύριο μαξιλάρι του μηχανήματος πρέπει να στερεωθεί με βίδες

4) Κλείστε το φερμουάρ του μαξιλαριού πλάτης στο πάνω μέρος της πλάτης και μετά επικολλήστε το μαξιλάρι με γάντζο και βρόχο

5) Μέθοδος τοποθέτησης του καλωδίου σύνδεσης (κάτω από την πλάτη της καρέκλας μασάζ)

Εγκατάσταση




Διακόπτης

Sodet


(6) Πώς να μετακινήσετε την καρέκλα μασάζ

Προσοχή, μην μετακινηθείτε με άτομα σε αυτό. Παρακαλούμε μην κινείστε με μικρούς τροχούς για να καταστραφεί εύκολα.

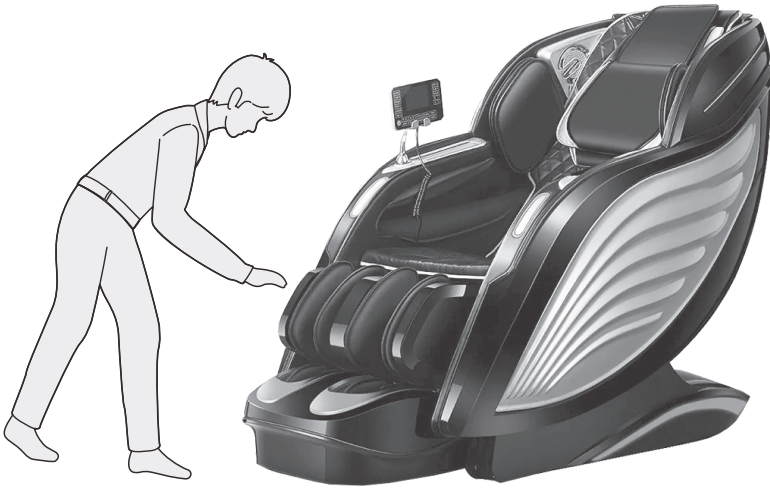

Οδηγίες λειτουργίας του προγράμματος μασάζ

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό της πολυθρόνας μασάζ και ενεργοποιήστε το διακόπτη.

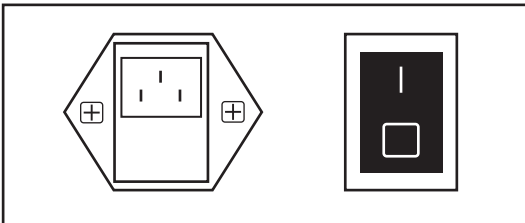

Σχεδιάγραμμα 1


Προειδοποιήσεις

Προειδοποίηση

Μην πιέζετε προς τα κάτω προς την γάμπα όταν ανεβαίνει, για να αποφύγετε την κλίση της καρέκλας μασάζ προς τα εμπρός και να προκαλέσετε ζημιές και τραυματισμούς




Μην πιέζετε προς τα κάτω

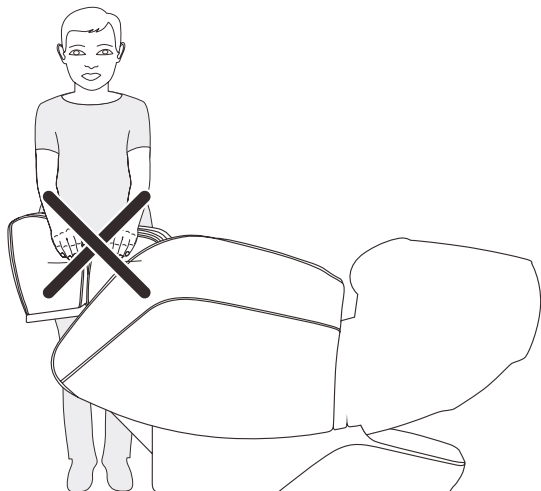

Προειδοποίηση


Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια του μασάζ δεν είναι στη θέση του καθίσματος πριν καθίσετε πάνω του, για να αποφύγετε άβολα ή ζημιά στα χέρια μασάζ

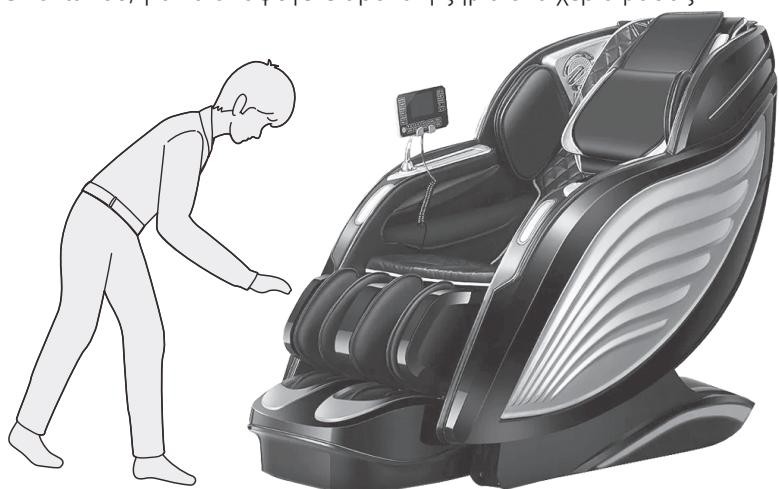

Προειδοποιήσεις


⚠ Προειδοποίηση

Σε κατάσταση αναμονής και ενεργοποίησης, μην τραβάτε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου ή το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε ζημιά ή ξαφνική ηλεκτροπληξία. Συνιστάται η κύλιση του καλωδίου του τηλεχειριστηρίου και του καλωδίου τροφοδοσίας

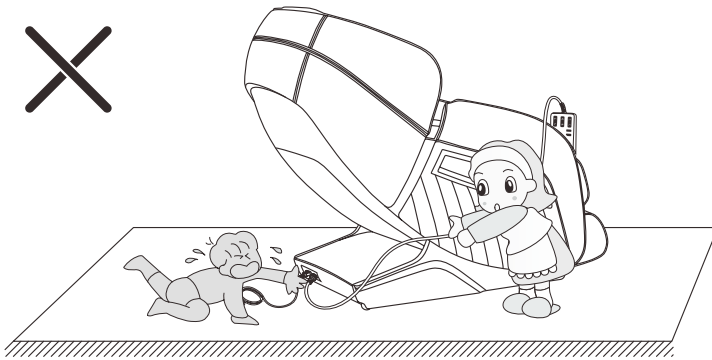



⚠ Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κατοικίδια και παιδιά κάτω από το στήριγμα ποδιών και την πλάτη πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μηδενικής βαρύτητας, για να αποφύγετε ζημιές και τραυματισμούς

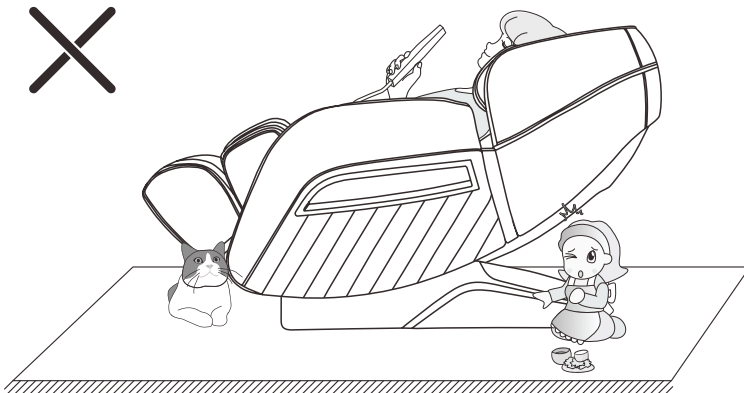


Οδηγίες λειτουργίας του χειροκίνητου ελεγκτή

Τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας δεν είναι τυπικές ρυθμίσεις. Εάν το πραγματικό αντικείμενο που λάβατε είναι χωρίς τα κουμπιά που εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα, παραλείψτε αυτήν τη σελίδα
Ανατρέξτε στο πραγματικό αντικείμενο.

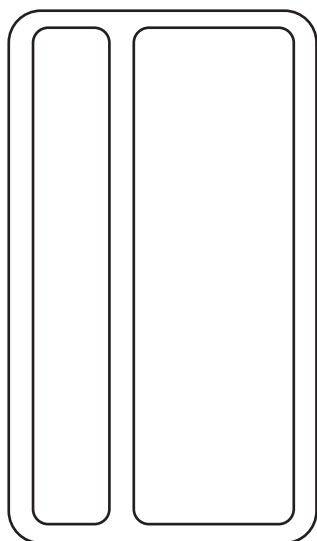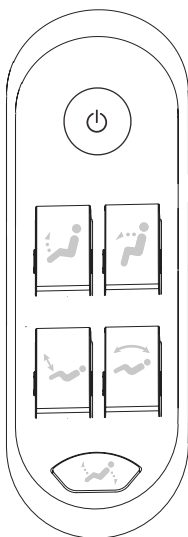

Οδηγίες λειτουργίας του χειροκίνητου ελεγκτή

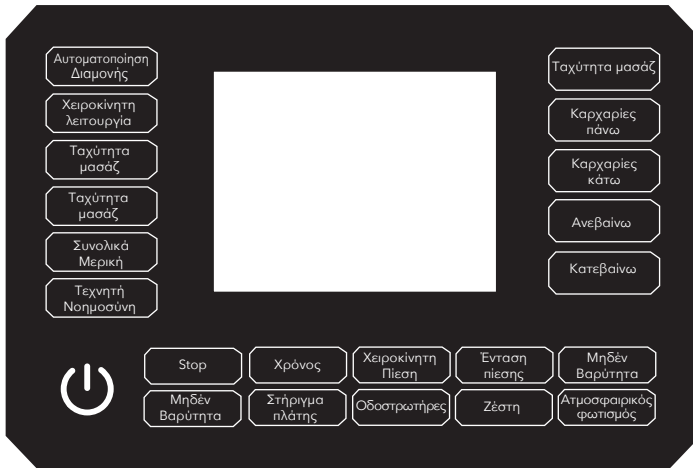

Εγχειρίδιο χρήστη

Ξεκινήστε το μασάζ

Ενεργοποιήστε, πατήστε το κουμπί “για έναρξη/διακοπή μασάζ θα ξαπλώσει στην προεπιλεγμένη γωνία, στη συνέχεια θα σαρώσει τη φιγούρα αυτόματα και το πρόγραμμα αυτόματου μασάζ “Master Care” θα ενεργοποιηθεί αφού πατήσετε αυτό το κουμπί όταν η καρέκλα μασάζ είναι ενεργοποιημένη, ο χρονοδιακόπτης είναι προρυθμισμένος για 20 λεπτά. Πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για να διακοπεί όλων των λειτουργιών μασάζ και επαναφορά. Αυτόματη λειτουργία. Κουμπί αυτόματης λειτουργίας: τα ακόλουθα είναι διαθέσιμα αυτόματα προγράμματα: Χαλαρωτικό μασάζ, Μασάζ πλήρους σώματος, Χαλαρώστε τον εγκέφαλο, Αθλητισμός, Περιποίηση άκρων, Υγιεινή φόρτιση, Κύρια φροντίδα, Καταπραΰνετε τα νεύρα, Βελτίωση πόνου, Thai Stretch Relax λαιμό και ώμο, Περιποίηση μέσης, Bodybuilding και Διαμόρφωση, Ανάκτηση κόπωσης, Μοντέλο κυρίας, Λειτουργία υπαλλήλου γραφείου, Λειτουργία χρήστη υπολογιστή, τέντωμα ποδιών, πλήρης πίεση αέρα. Συνολικά 21 προγράμματα (το PLS ελέγχει τις λεπτομέρειες στην οθόνη ενδείξεων στο υποβραχιόνιο). Χειροκίνητη λειτουργία Κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας, τα παρακάτω είναι διαθέσιμα μη αυτόματα προγράμματα. Ολοτρογγυλό ζύμωμα, Μπροστινό ζύμωμα, Αντίστροφο ζύμωμα, Ζύμωμα άνω σώματος, Ζύμωμα κάτω Κτύπημα σώματος, Ζύμωμα και παλαμάκια, πάτημα με τα δάχτυλα, Χτύπημα, Ζύμωμα και ξύσιμο, Ξύσιμο και χτύπημα, Ζύμωμα και τρύπημα

Συνολικά 21 προγράμματα, θα στρώσει ένα διαφορετικό μη αυτόματο πρόγραμμα μόλις πατήσετε το. Κουμπί χειροκίνητα προγράμματα Ταχύτητα μασάζ Κουμπί ταχύτητας μασάζ, Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του μασάζ που χρειάζεστε με αυτό το κουμπί Ρύθμιση πλάτους Κουμπί ρύθμισης πλάτους,

Όταν λειτουργεί το χειροκίνητο πρόγραμμα πατώντας, Knocking, πάτημα δακτύλου, κάθε πάτημα σε αυτό. Συνολικά/Μερική

Συνολικό/Μερικό κουμπί,

Ρυθμίστε την κάθετη περιοχή μασάζ από τη συνολική, τη μερική και τη θέση

Να σταματήσει

Κουμπί διακοπής, Όλες οι λειτουργίες θα τεθούν σε παύση αφού πατήσετε αυτό το κουμπί σε κατάσταση λειτουργίας

Κουμπί nme nme, Κάθε πάτημα σε αυτό το κουμπί θα αλλάξει το χρονόμετρο 10 λεπτά, ο μεγαλύτερος χρονόμετρο είναι 30 λεπτά.

Χειροκίνητο κουμπί πίεσης, Ρυθμίστε την περιοχή εργασίας μασάζ αέρα με αυτό το κουμπί

Ένταση Πίεσης

Κουμπί Έντασης Πίεσης, Μπορείτε να ρυθμίσετε την Ένταση Αεροπίεσης που χρειάζεστε με αυτό το κουμπί όταν λειτουργούν χειροκίνητα προγράμματα

Μηδενική βαρύτητα

Κουμπί μηδενικής βαρύτητας, πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να επαναφέρετε τη λειτουργία μηδενικής βαρύτητας

Backrestup

Κουμπί πλάτης, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να ανεβείτε στην πλάτη, αφήστε το κουμπί για να κλειδώσετε τη θέση

Πίσω ανάσκελα

Κουμπί πλάτης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να κατεβείτε στην πλάτη, αφήστε το κουμπί για να κλειδώσετε τη θέση

Foot Roller. Κουμπί Foot Roller, πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει το μασάζ με ρολό ποδιού και σταματήστε το πατώντας ξανά αυτό το κουμπί

Διαθετικός φωτισμός. Κουμπί Mood Lighting, πατήστε αυτό το κουμπί για να ανάψετε το φως και να το σβήσετε πατώντας ξανά αυτό το κουμπί

Ο Αλ

Al Button, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον φωνητικό έλεγχο με αυτό το κουμπί

Αυτόματη πίεση Ξεκινήστε ή σταματήστε το αυτόματο μασάζ αέρα με αυτό το κουμπί

ShanksUP Κουμπί Shanks Up, Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να σηκώσετε το υποπόδιο, αφήστε το κουμπί για να κλειδώσετε τη θέση

Σανκς κάτω

Κουμπί Shanks Down, Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να χαμηλώσετε το υποπόδιο, αφήστε το κουμπί για να κλειδώσετε τη θέση

Ανεβαίνω

Ανεβείτε το κουμπί, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να μετακινήσετε τα χέρια του μασάζ προς τα πάνω, αφήστε το κουμπί ώστε να μην βρίσκεται στη θέση

Πήγαινε κάτω

Κουμπί κατεβαίνοντας, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να μετακινήσετε τα χέρια μασάζ προς τα κάτω, αφήστε το κουμπί για να κλειδώσετε τη θέση

Θέρμανση: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας πίσω θέρμανσης

Voice-activated instructions

	Welcome to use smart massage products, please say Hello lily to wake me up	require
1	Hello lily	Hello master
2	turn on massage	Ok open the massage I am happy to serve you
3	turn off massage	Welcome to use smart massage products, please say Hello lily to wake me up
4	Turn on voice	Ok turn on voice control
5	Turn off voice	Master, wake up and turn on me when you need voice control
8	Relaxing massage	Ok, Relaxing massage
9	Full body massage	Ok, Full body massage
10	Relax the brain	Ok, Relax the brain
11	Sports conditioning	Ok, Sports conditioning
12	Spine Care	Ok, Spine Care
13	Stimulate vitality	Ok, Stimulate vitality
14	Lower limb care	Ok, Lower limb care
15	Limb care	Ok, limb care
16	Healthy charging	Ok, Healthy charging
17	Master Care	Ok, Master Care
18	Soothe the nerves	Ok, Soothe the nerves
19	Soreness improvement	Ok, Soreness improvement
20	Thai Stretch	Ok, Thai Stretch
21	Relax neck and shoulder	Ok, Relax neck and shoulder
22	Waistcare	Ok, Waistcare
23	Bodybuilding and Shaping	Ok, Bodybuilding and Shaping

24	Fatigue recovery	Ok, Fatigue recovery
25	Lady mode	Ok, Lady mode
26	Office worker mode	Ok, Office worker mode
27	Computer user mode	Computer user mode
28	Leg stretch	Ok, Leg stretch
29	Full air pressure	Ok, Full air pressure
30	Manual mode	Ok, Manual mode
31	Automatic mode	Ok, Automatic mode
32	Airbag pressure massage	Ok, Airbag pressure massage
33	All round kneading	Ok, All round kneading
34	Forward kneading	Ok, Forward kneading
35	Reverse kneading	Ok, Reverse kneading
36	Kneading the upper body	Ok, Kneading the upper body
37	Kneading the lower body	Ok, Kneading the lower body
38	Slapping technique	Ok, Slapping technique
39	Kneading and claping technique	Ok, Kneading and claping technique
40	Fingering technique	Ok, Fingering technique
41	Beating technique	Ok, Beating technique
42	Knead scraping technique	Ok, Knead scraping technique
43	Scratch technique	Ok, Scratch technique
44	Kneadhammertechinque	Ok, Kneadhammertechinque
45	Maximumwidth	Ok, Maximumwidth
46	Middle width	Ok, Middle width
47	Minimumwidth	Ok, Minimumwidth
48	Increase intensity	Ok, Increase intensity
49	Reduceintensity	Ok, Reduce intensity
50	Maximumintensity	Ok, Maximum intensity
51	Minimumintensity	Ok, Minimum intensity
52	Full back massage	Ok, Full back massage

53	Upper back massage	Ok, Upper back massage
54	Lower back massage	Ok, Lower back massage
55	Partial massage	Ok, Partial massage
56	Fixed-point massage	Ok, Fixed-point massage
57	Timing 10 minutes	Ok, Timing 10 minutes
58	Timing 20 minutes	Ok, Timing 20 minutes
59	Timing 30 minutes	Ok, Timing 30 minutes
60	Open the Airbag	Ok, open the airbag
61	Close the Airbag	Ok, Close the Airbag
62	Add pressure	Ok, Add pressure
63	Reduce pressure	Ok, Reduce pressure
64	Openscroll wheel	Ok, Openscroll wheel
65	Close scroll wheel	Ok, Close scroll wheel
72	Increase volume	Ok, Increase volume
73	Decrease volume	Ok, Decrease volume
74	Maximunvolume	Ok, Maximunvolume
75	Minimumvolume	Ok, Minimumvolume
76	Backrest down	Ok, Backrest down
77	Backrest rise	Ok, Backrest rise
78	Leg extension	Ok, Leg extension
79	Shorten the leg	Ok, Shorten the leg
82	Increase calf strength	Ok, Strength has increased
83	Reducecalf strength	Ok, Strength has reduced
84	Turn on bluetooth	Ok, Turn on bluetooth
85	Turn off bluetooth	Ok, Turn off bluetooth
86	Thanks for using	Thanks for using

AI Μέθοδοι χρήσης

Ξυπνήστε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου μιλώντας “Hello lily” όταν η πολυθρόνα μασάζ είναι ενεργοποιημένη ή σε κατάσταση αναμονής.

Μόλις αφυπνιστεί, θα απαντήσει “Hello master” οι χρήστες μπορούν να εκφωνήσουν τις αντίστοιχες λέξεις φωνητικού ελέγχου εντός 8 δευτερολέπτων, διαφορετικά η λειτουργία φωνητικού ελέγχου θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα πρέπει να αφυπνιστεί ξανά.

Υπό θορυβώδεις συνθήκες ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αφυπνισμένη φωνή δεν θα είναι ευαίσθητη, μπορεί να γίνει πατώντας το κουμπί φωνητικού ελέγχου στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε το κουμπί AI για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικού ελέγχου

Σημείωση: Μιλήστε σωστά και αργά, ακολουθήστε τις παρακάτω λέξεις

Καθημερινή συντήρηση

1. Σε καθημερινή καθαριότητα, χρησιμοποιήστε το ουδέτερο απορρυπαντικό και σκουπίστε με μαλακό πανί. Απαγορεύεται η χρήση του διαβρωτικού απορρυπαντικού.
2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί του καταστήματος συντήρησης που ορίζει ο κατασκευαστής μπορούν να ανταλλάξουν το καλώδιο, αποφεύγοντας έτσι ατυχήματα.
3. κατά την τοποθέτηση βοθημάτων ή τον καθαρισμό του εξοπλισμού, τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε τον κίνδυνο.
4. Μην γρατσουνίζετε την επιφάνεια του προϊόντος με αντικείμενο καρχαρία
5. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον, αλλά πρέπει να τοποθετείται σε μέρη με καλό αερισμό
6. Μην συμπιέζετε πολύ το προϊόν και μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο προϊόν

Βλάβη και συντήρηση

Φαινόμενο σφάλματος	Πιθανή αιτία	Θεραπεία
<p>Με ήχο (ήχος σε διαδικασία Air ήχος φόρτισης του ar Seg Ήχος εκκένωσης αέρα του αερόσακος Ήχος μακρομαγνητικής βαλβίδας αναστροφής Ήχος από τη λειτουργία της αντλίας αέρα Δεν λειτουργεί όλος ο εξοπλισμός</p>	<p>Ο ήχος της μηχανικής λειτουργίας όταν το προϊόν λειτουργεί.</p>	<p>Ο ήχος είναι κανονικός. Δεν υπάρχει ανάγκη θεραπείας</p>
<p>Φαινόμενο σφάλματος</p>	<p>Το βύσμα τροφοδοσίας δεν έχει τοποθετηθεί στην υποδοχή Η πρίζα δεν είναι ενεργοποιημένη. Το κουμπί μασάζ δεν είναι πατημένο.</p>	<p>Παρακαλούμε ελέγξτε το βύσμα τροφοδοσίας, το βιδώστε και βεβαιωθείτε ότι έχετε καλή επαφή με το βύσμα και την πρίζα και πατημένο το κουμπί μασάζ</p>
<p>Σταματήστε το μασάζ ξαφνικά στη διαδικασία της επέμβασης</p>	<p>Το προϊόν μόλις συμπλήρωσε τον ονομαστικό χρόνο εργασίας των 15 λεπτών και μπήκε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.</p>	<p>Αν θέλετε να απολαύσετε ένα ακόμη μασάζ, πατήστε ξανά το κουμπί για να ξεκινήσει η λειτουργία μασάζ</p>
	<p>Απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό και διακόψτε την παροχή ρεύματος</p>	<p>Περιμένετε για λίγο μέχρι να κρυώσει το matc tabe πριν το λειτουργήσετε μια φορά</p>

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το προϊόν και το εγχειρίδιο οδηγιών. Μας συγχωρείτε που δεν θα προβούμε σε καμία πρόσθετη ειδοποίηση εάν υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση. Η εμφάνιση του προϊόντος υπόκειται στην οντότητα.

Αυτό το εγχειρίδιο έχει εγκριθεί προσεκτικά. Ωστόσο, δεν μπορούν να εξαλειφθούν τυχόν λάθη εκτύπωσης ή διαρροές ή παρεξηγήσεις του περιεχομένου. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Η εταιρεία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος διερμηνείας.

Εάν τα απόβλητα απορριφθούν ακατάλληλα, μπορεί να μολύνουν το περιβάλλον.

FUJIA Trading Company Ltd.

Σερρών 54, Ακαδημία Πλάτωνος - Αττική ΤΚ: 10441

τηλ.: 2105200010 - e-mail: info@fujia.gr

www.fujia.gr